



IDS 2025 Інноваційні продукти Leone



Hybrid Mode Expander / Mini Hybrid Mode Expander

Гібридний розширювач / Міні гібридний розширювач

Новий асортимент розширювачів, оснащених нікель-титановими пружинними пластинами (такими ж, як у серії Leaf), ідеально підходить для створення знімних апаратів для підготовчої фази лікування елайнерами.

Мета полягає в збільшенні простору в зубних дугах, зменшенні потреби в стріппінгу та зменшенні кількості елайнерів. Доступні в різних розмірах і з різною силою, яку забезпечують нікель-титанові пружини.

Обмежена здатність розширення до 4 або 6 мм.



Hybrid Mode Expander 4 Arms

11 mm	4 mm	arms	body	
		A2726-04	1,1 mm	4 mm
		4 springs 900 g approx.	13 mm	
		A2726-06	1,1 mm	6 mm
		6 springs 900 g approx.	15 mm	

AVAILABLE
STARTING
APRIL 2025


Mini Hybrid Mode Expander 4 Arms



					
7,5 mm		3 mm		arms	body
				A2504-04 4 springs 600 g approx.	1,1 mm 11 mm 4 mm
				A2504-06 6 springs 600 g approx.	1,1 mm 13 mm 6 mm

Mini Hybrid Mode Expander 2 Arms

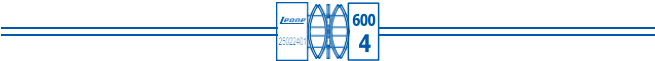

						
7,5 mm		3 mm		arms	body	
				A2502-04 4 springs 600 g approx.	0,9 mm 11 mm 4 mm	
				A2502-06 6 springs 600 g approx.	0,9 mm 13 mm 6 mm	

Leaf Self Expander® Anatomical / Mini Leaf Self Expander®**Анатомічний саморозширювач Leaf / Міні саморозширювач Leaf**

Анатомічний саморозширювач Leaf. Ці розширювачі доповнюють існуючу лінійку Leaf Self Expander®, двома новими типами зі зменшеним розміром для виготовлення фіксованих апаратів. Вони призначені для розширення поперечного розміру зубної дуги або дисталізації верхніх молярів. Доступні для аналогових або цифрових робочих процесів у різних конфігураціях.

Здатність розширення 6 або 9 мм і пружини на 600 г.

**Leaf Self Expander® Anatomical**

6 mm	4,5 mm	arms	body		
		A2503-06			
		6 springs 600 g approx.			
		1,5 mm	13 mm	6 mm	
		A2503-09			
		8 springs 600 g approx.			
		1,5 mm	16 mm	9 mm	

AVAILABLE
STARTING
MAY 2025


Leaf Self Expander® Anatomical CAD-CAM



 6 mm		 4,5 mm	body	
			A2503-06D 6 springs 600 g approx.	13 mm 6 mm
			A2503-09D 8 springs 600 g approx.	16 mm 9 mm

Mini Leaf Self Expander® CAD-CAM

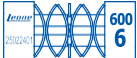


 7,5 mm		 3 mm	 body	
			A2502-06D 6 springs 600 g approx.	13 mm 6 mm

Telescopic CAD-CAM Expander Телескопічний розширювач CAD-CAM

Цей новий розширювач Leone® має подвійний телескопічний гвинт. Завдяки відмінному співвідношенню розміру та розширення, цей новий продукт підходить для швидкого піднебінного розширення, навіть у пацієнтів з особливо малими поперечними розмірами.

За допомогою міні-гвинтів для піднебінної фіксації (TADs), він також може використовуватися для дорослих пацієнтів.

Доступний виключно для цифрового робочого процесу, включеного в програмне забезпечення **3DLeone Designer**. Здатність розширення 10, 14 і 18 мм.

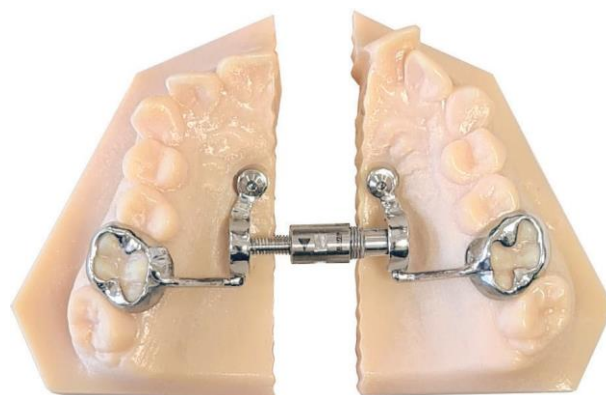

 x mm		 x mm	 body		
		A0640-10D	11 mm	10 mm	
		A0640-14D	13 mm	14 mm	
		A0640-18D	15 mm	18 mm	

Кожен розширювач включає інноваційний поворотний ключ, який спрощує внутрішньоротову активацію лише одним рухом, спрощуючи процедуру порівняно з іншими продуктами, вже представленими на ринку.



F1000Plus D.B Metal Brackets - Passive Self Ligating

Металеві брекети F1000Plus D.B - пасивне самолігування, брекети F1000 Plus розроблені для задоволення найбільш складних біомеханічних потреб, з метою спрощення клінічного управління. Дизайн брекетів характеризується механізмом пасивного самолігування, який закріплює дугу всередині паза і, залежно від розміру та геометрії дуги, дозволяє використовувати механіку низького тертя на початкових етапах, сприяти ковзанню при ретракції фронтальної групи та отримати повний контроль значень нахилу і торку на заключних етапах лікування. Брекети F1000 Plus, завдяки описаним особливостям, є біомеханічно ефективними, зі значним скороченням часу лікування та перебування в кріслі, сприяючи задоволенню пацієнта та максимальному комфорту.



D.B. Brackets F1000Plus - ROTH System .022"

20 brackets
1 case200 brackets
10 cases

F1000Plus

D.B. Brackets
Passive Self-Ligating

leone

F1000-93**F1001-93**

D.B. Brackets F1000Plus - MBT System .022"

20 brackets
1 case200 brackets
10 cases

F1000Plus

D.B. Brackets
Passive Self-Ligating

leone

F1000-92**F1001-92**

D.B. Brackets F1000Plus - DAMON System .022"

20 brackets
1 case200 brackets
10 cases

F1000Plus

D.B. Brackets
Passive Self-Ligating

leone

F1000-91**F1001-91**

Refills

ПРАЙС

A2502-04	Гібридний міні розширювач LEAF 4 пружини 4мм (сила 600)	Leone	34,00	€
A2502-06	Гібридний міні розширювач LEAF 6 пружин 6мм (сила 600)	Leone	38,00	€
A2502-06D	Гібридний міні розширювач LEAF CAD-CAM 6 пружин 6 мм (сила 600)	Leone	38,00	€
A2503-06	Розширювач LEAF анатомічний 6 пружин 6 мм (сила 600)	Leone	35,00	€
A2503-09	Розширювач LEAF анатомічний 8 пружин 9 мм (сила 600)	Leone	40,00	€
A2503-06D	Розширювач LEAF анатомічний CAD-CAM 6 пружин 6 мм (сила 600)	Leone	35,00	€
A2503-09D	Розширювач LEAF анатомічний CAD-CAM 8 пружин 9 мм (сила 600)	Leone	40,00	€
A2504-04	Гібридний міні розширювач LEAF 4 пружини 4 мм (сила 600)	Leone	34,00	€
A2504-06	Гібридний міні розширювач LEAF 6 пружин 6 мм (сила 600)	Leone	38,00	€
A2726-04	Гібридний розширювач LEAF 4 пружини 4мм (сила 900)	Leone	35,00	€
A2726-06	Гібридний розширювач LEAF 6 пружини 6мм (сила 900)	Leone	40,00	€
A0640-10D,14,18	Телескопічний розширювач CAD-CAM 10 мм, 14 мм, 18 мм	Leone	50,00	€
F1000-93	Брекети Plus самолігуючі пасивні 022 20шт.	Leone	135,00	€

Представник в Україні ТОВ «ІНТЕРДЕНТ»
www.interdent.com.ua



interdent_ortho



facebook.com/interdentortho



interdent_ortho@ukr.net